

安^{あんじゅ}寿 住宅用連続手すり スタンドジョイント

施工説明書

正しく取り付けていただくため、施工前にこの施工説明書を必ずお読みください。

別冊「施工要領書」に記載の「取扱説明書（お客様用）」をコピーしていただくか、下記ホームページアドレスから「取扱説明書（お客様用）」をダウンロードしていただき、取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明のうえ、「取扱説明書（お客様用）」を必ずお渡してください。

ホームページアドレス <http://www3.aronkasei.co.jp/anju/>

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

注意 誤った取り扱いをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

！ 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。

警告



絶対に分解・修理・改造をしないこと
破損してけがの原因になります。



取り付けは必ず指定寸法に従うこと
手すりが破損し、けがの原因になります。

注意



必ず同梱のねじを使用し、丸棒・部材（ブラケット）・補強板（ベース材）は当社品を使用すること
取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

取り付けは必ず専門業者が行うこと
取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

取り付けは必ず適切な下穴をあけてからねじ固定すること
取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

ねじ固定はかえりなどが出ないように行うこと
けがの原因になります。

開き戸付近に取り付ける場合は開閉するドアが手にあたらないう位置に取り付けること
けがの原因になります。

丸棒を部材（ブラケット）の奥まで差し込んで固定すること
取り付けが不安定になり、けがの原因になります。



六角レンチを使用して固定するねじは硬くなるまで締め付け、増し締めすること
取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

取り付け完了後、手すりにガタツキがないか確認すること
ガタツキがある場合、製品が外れたり破損してけがの原因になります。




スタンドベースの支柱には必ずφ35mmの丸棒を使用し、ディンプル付きの丸棒は使用しないこと
手すりが破損し、けがの原因になります。

屋外や浴室内など水がかかったり湿気の多い場所や水没する場所には設置しないこと
下地および商品を濡らさないこと
腐食・劣化し、製品が外れたり破損してけがの原因になります。

直接熱をかけたり、熱器具の近くに取り付けないこと
火災や変形・破損の原因になります。

各部のなまえ・仕様

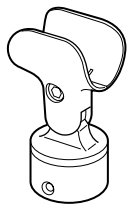

本体：1個
(材質：亜鉛合金)





φ32用スペーサー：1個
(材質：PP)

●タッピンねじ (材質：スチール)
3.5×16mm：2本


●六角レンチ：1本

製品寸法 (単位：mm)
図中の () 寸法はφ32使用時

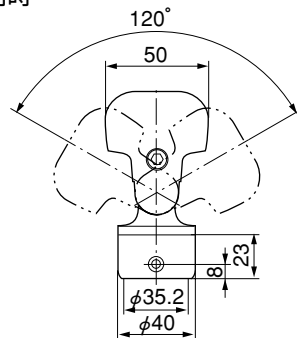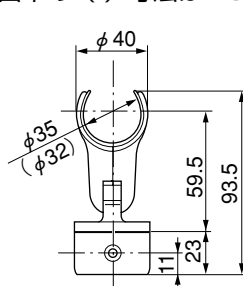

取り付けかた

●取り付け指定寸法

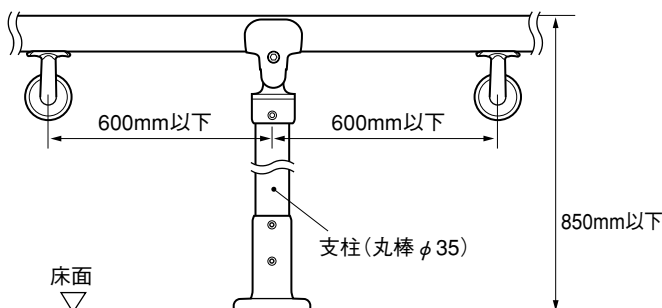


警告
取り付けは必ず指定寸法に従うこと
手すりが破損し、けがの原因になります。



注意
本製品の両側には必ず下記の部材^{※1}を指定寸法で設置すること
手すりが破損し、けがの原因になります。

※1
手すり金具壁受け・手すり金具壁受け通し・手すり金具
壁受け出幅調節・手すり金具壁受け通し出幅調節

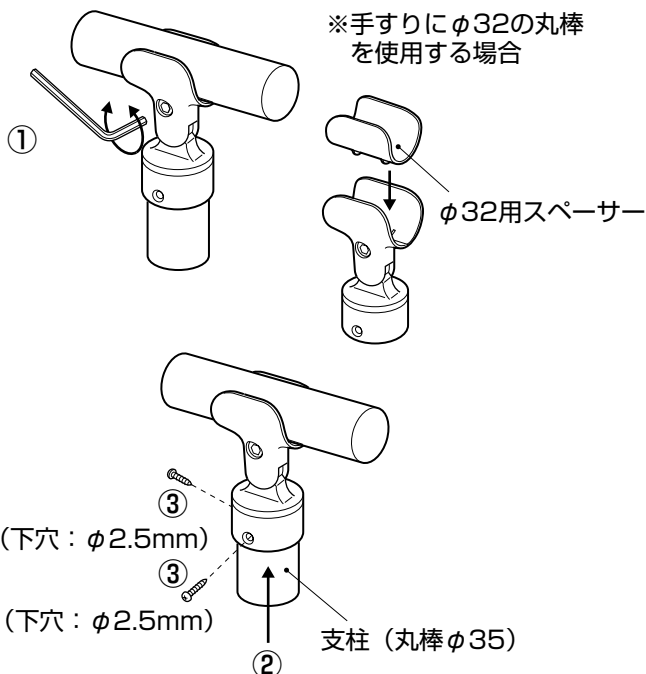

①本体のねじを緩めて丸棒をはさみ、丸棒の取り付け
角度を調整しながら添付の六角レンチでねじを締め
付け、増し締めして丸棒を固定してください。
(参考締め付けトルク：8N・m)

※手すりにφ32の丸棒を使用する場合は同梱のφ32
用スペーサーを本体にセットして丸棒をはさんでね
じを締めてください。

②丸棒を本体に差し込んでください。

③丸棒に下穴 (φ2.5mm) をあけてタッピンねじ
(丸棒用) で固定してください。(2ヶ所)



注意
支柱には必ずφ35mmの丸棒を使用し、ディ
ンプル付きの丸棒は使用しないこと
手すりが破損し、けがの原因になります。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

08.09

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL (03) 5420-1556
FAX (03) 5420-7750

東京営業グループ ☎(03)5420-1562
大阪支店 ☎(06)6448-5127
名古屋支店 ☎(052)203-0396
福岡支店 ☎(092)741-1411

仙台支店 ☎(022)291-5477
広島支店 ☎(082)245-7100
札幌営業所 ☎(011)709-6011